

High Performance UV Transilluminatoren

Produktbeschreibung


Die exklusiven High Performance UV Transilluminatoren sind mit vier 25 Watt Röhren ausgerüstet und strahlen 100 Watt UV-Licht ab. Sie sind für alle Anwendungen ideal, bei denen besonders intensive UV-Strahlung benötigt wird. Die Geräte sind CE-zertifiziert.

Eigenschaften

- Single Intensity Modelle mit Wahlmöglichkeit zwischen 302 nm und 365 nm Wellenlänge
- High/Low Intensity Modelle mit 254 nm, 302 nm oder 365 nm Wellenlänge
- abnehmbare und justierbare Abdeckung
- einfache Reinigung des Gehäuses aus rostfreiem Stahl

Vorteile

- bei den High/Low Intensity Modellen kann die Intensität des UV-Lichts an den Anwendungsbereich angepasst werden: Low Setting für präparative Arbeiten, High Setting für Analyse und Dokumentation
- Schutz der Probe vor Beschädigung durch gute Kühlung und geringe Oberflächentemperatur des Filters
- durch den UVG Long-Life Filter wird eine brillante Beleuchtung gewährleistet

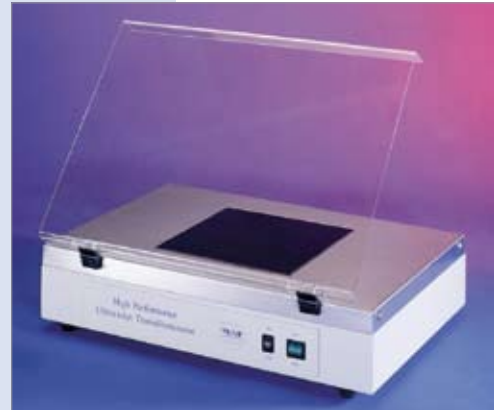

High Performance UV Transilluminator TFM-20

Spezifikation

| Artikel-Nr. | Modell | Wellenlänge | Filterfläche | Röhren | Maße (B x T x H) | Gewicht |
|-------------|---------|-------------|--------------|---------|--------------------|---------|
| 110.3010 | TFML-20 | 302/365 nm | 20 x 20 cm | 25 Watt | 486 x 337 x 143 mm | 9,6 kg |
| 110.3011 | TFML-26 | 302/365 nm | 21 x 26 cm | 25 Watt | 486 x 337 x 143 mm | 9,6 kg |
| 110.3012 | TFML-30 | 302/365 nm | 25 x 30 cm | 25 Watt | 486 x 337 x 143 mm | 9,6 kg |
| 110.3013 | TFML-40 | 302/365 nm | 20 x 40 cm | 25 Watt | 486 x 337 x 143 mm | 9,6 kg |
| 110.3015 | TFS-20V | 254 nm | 20 x 20 cm | 25 Watt | 486 x 337 x 143 mm | 9,6 kg |
| 110.3016 | TFS-26V | 254 nm | 21 x 26 cm | 25 Watt | 486 x 337 x 143 mm | 9,6 kg |
| 110.3017 | TFS-30V | 254 nm | 25 x 30 cm | 25 Watt | 486 x 337 x 143 mm | 9,6 kg |
| 110.3018 | TFS-40V | 254 nm | 20 x 40 cm | 25 Watt | 486 x 337 x 143 mm | 9,6 kg |
| 110.3000 | TFM-20V | 302 nm | 20 x 20 cm | 25 Watt | 486 x 337 x 143 mm | 9,6 kg |
| 110.3001 | TFM-26V | 302 nm | 21 x 26 cm | 25 Watt | 486 x 337 x 143 mm | 9,6 kg |
| 110.3002 | TFM-30V | 302 nm | 25 x 30 cm | 25 Watt | 486 x 337 x 143 mm | 9,6 kg |
| 110.3003 | TFM-40V | 302 nm | 20 x 40 cm | 25 Watt | 486 x 337 x 143 mm | 9,6 kg |
| 110.3014 | TFL-40V | 365 nm | 20 x 40 cm | 25 Watt | 486 x 337 x 143 mm | 9,6 kg |