


## UV-Handlampen VL-Serie mit Filter

### Produktbeschreibung

Der spezielle Filter dieser Lampen minimiert den Weißlichtanteil im UV und ermöglicht dadurch auch die Erfassung schwacher Fluoreszenzen. Die Lampen sind extrem langlebig und hocheffizient. Sie können bei den UV-Handlampen VL mit Filter zwischen drei Wellenlängen wählen: 254 nm, 312 nm und 365 nm. In einigen Modellen sind unterschiedliche Wellenlängen kombiniert.


### Eigenschaften

- Langlebiger Filter und hoher UV Output
- Lampen mit ein oder zwei Wellenlängen erhältlich
- Wellenlänge bei den dualen Geräten einfach durch Knopfdruck wechselbar
- Spezieller Ondulex Reflektor für optimale Strahlungsintensität
- eloxiertes Aluminium-Gehäuse
- vielseitig einsetzbar mit Lampenständer oder -halter
- intuitive Bedienbarkeit

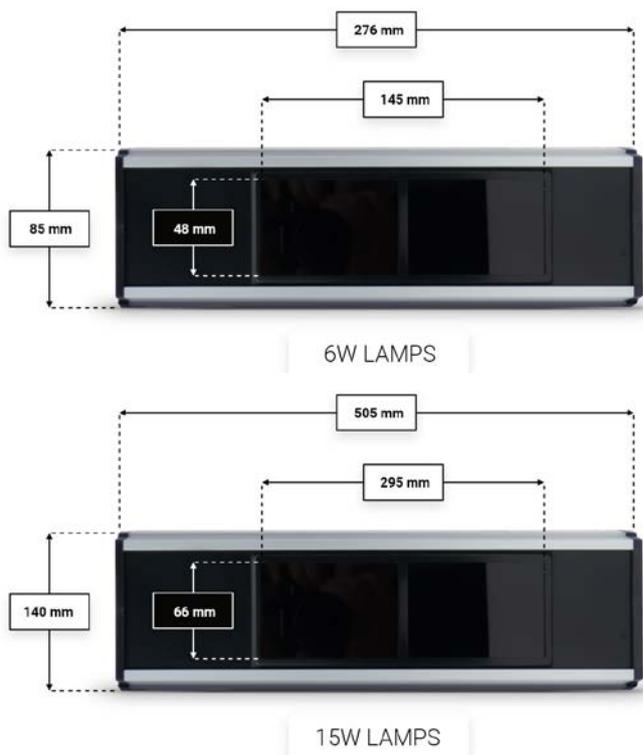

### Technische Daten

| Modell         | Röhren x Watt | Wellenlänge     | Intensität bei 15 cm ( $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ) | UV-Fläche Länge x Tiefe | Abmessungen (B x T x H) | Artikelnummer |
|----------------|---------------|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>6 Watt</b>  |               |                 |  |                         |                         |               |
| VL-6.L         | 1 x 6 W       | 365 nm          | 700  | 150 x 48 mm             | 276 x 85 x 60 mm        | 110.0007      |
| VL-6.C         | 1 x 6 W       | 254 nm          | 710  | 150 x 48 mm             | 276 x 85 x 60 mm        | 110.0008      |
| VL-6.LC        | 2 x 6 W       | 365 nm / 254 nm | 610 / 400  | 150 x 48 mm             | 276 x 85 x 60 mm        | 110.0010      |
| <b>15 Watt</b> |               |                 |  |                         |                         |               |
| VL-215.L       | 2 x 15 W      | 365 nm          | 2300   | 295 x 76 mm             | 505 x 140 x 100 mm      | 110.0016      |
| VL-215.C       | 2 x 15 W      | 254 nm          | 1780   | 295 x 76 mm             | 505 x 140 x 100 mm      | 110.0017      |
| VL-215.M       | 2 x 15 W      | 312 nm          | 3000   | 295 x 76 mm             | 505 x 140 x 100 mm      | 110.0018      |
| VL-215.LC      | 2 x 15 W      | 365 nm / 254 nm | 1350 / 930   | 295 x 76 mm             | 505 x 140 x 100 mm      | 110.0019      |
| VL-215.LM      | 2 x 15 W      | 365 nm / 312 nm | 1350 / 1800  | 295 x 76 mm             | 505 x 140 x 100 mm      | 110.0020      |
| VL-215.MC      | 2 x 15 W      | 312 nm / 254 nm | 1800 / 930   | 295 x 76 mm             | 505 x 140 x 100 mm      | 110.0021      |

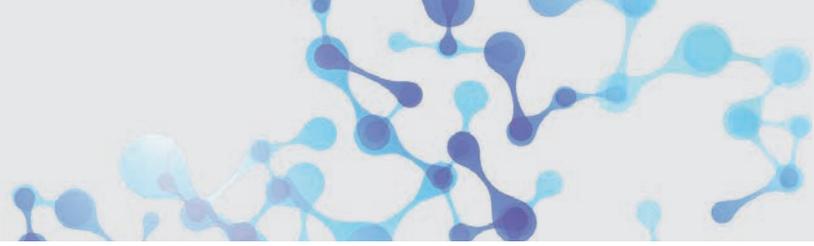

# UV-Handlampen VL-Serie Zubehör

## Optionales Zubehör

| Modell | Typ           | kompatibel mit    |
|--------|---------------|-------------------|
| SVL-30 | Lampenständer | VL-215 und VL-115 |
| SVL-6  | Lampenständer | VL-6 und VL-4     |
| SMA    | Haltegriff    | VL-6 und VL-4     |


### Lampenhalter

Besserer Bedienkomfort durch Lampengriff SMA. Ohne Montage, einfach zum Aufstecken auf die Lampe.

Artikelnummer Lampenhalter: 110.0200




Lampenhalter SMA

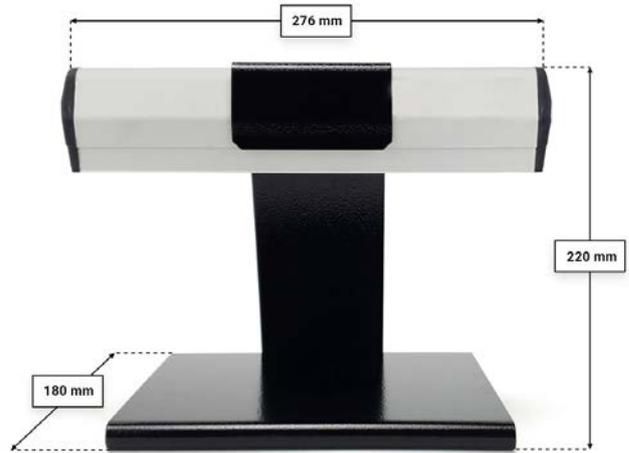

SVL-6

Lampenständer SVL-6

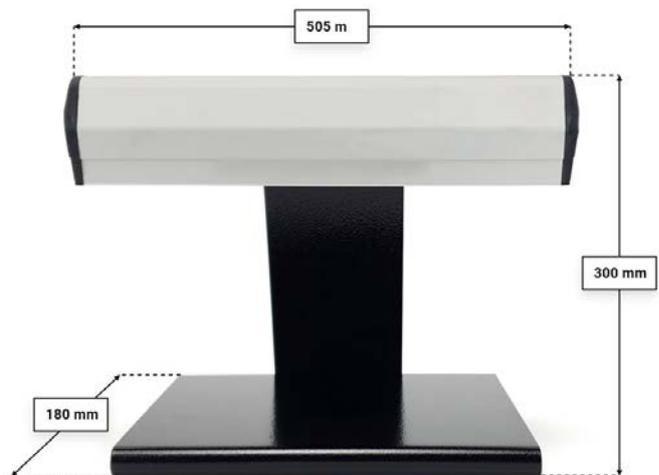

SVL-15

Lampenständer SVL-15