

## IsoFreeze MCT Rack

### Produktbeschreibung


Geniale optische Kontrolle für Ihre Proben!  
Der Mittelteil des Racks ist mit einem Gel gefüllt. Dieses ist in der Lage einen temperaturabhängigen Farbwechsel vorzunehmen. So erkennen Sie sofort, ob Ihre Proben noch die richtige Temperatur haben.

Bei 7°C gibt es eine deutliche Farbveränderung. Auf diese Weise können Sie auf einen Blick feststellen, wann die Temperatur des Racks oder sogar eines einzelnen Wells auf über die normale Kühltemperatur steigt.

Jedes Gestell wird mit einem individuellen Schnappdeckel aus transparentem Polypropylen geliefert.

### Spezifikation

- für 24 Tubes (0,5 / 1,5 / 2,0 ml) mit Schnapp- oder Schraubdeckel
- hält eine Probentemperatur von weniger als 4°C für ca. 4 Stunden
- deutlicher Farbwechsel bei 7°C
- Abmessungen (Rack + Deckel): 70 x 105 x 146 mm
- 2 Modelle:
  - Farbe wechselt von grün (kalt) zu gelb (warm)
  - Farbe wechselt von violett (kalt) zu pink (warm)
- Verpackungseinheit: 1 Rack mit Deckel

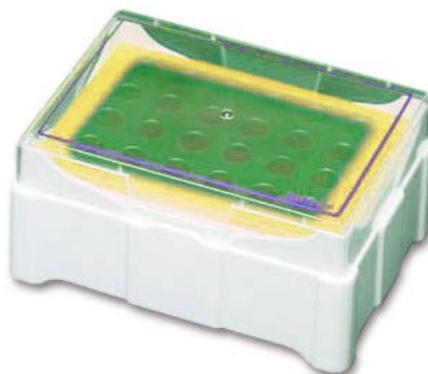

IsoFreeze MCT Rack grün/gelb



IsoFreeze MCT Rack violett/pink

Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	Artikelnummer
IsoFreeze MCT Rack Passend für Tubegrößen: 24 x 0,5 / 1,5 / 2,0 ml	grün/gelb	1 Rack mit Deckel	104.0047
IsoFreeze MCT Rack Passend für Tubegrößen: 24 x 0,5 / 1,5 / 2,0	violett/pink	1 Rack mit Deckel	104.0044