

# Horizontal-Kammern Mini, Midi und Maxi

#### Produktbeschreibung

Bei dieser Produktlinie handelt es sich um ein *Two-in-one-System* für zwei unterschiedliche Geltypen.
Für die normale DNA-Migration mit einer Stromspannung zwischen 40 und 90 Volt füllen Sie die Kammer bis ca. 2 mm über dem Gel-Level, so dass noch ein Pufferbereich darüber entsteht.

Für eine schnelle DNA-Migration mit hoher Stromspannung bis 250 Volt füllen Sie die Kammer bis zur angegebenen Fill-Linie. Fehlerströme werden so vermieden. Der darüber liegende Pufferbereich hat eine kühlende Funktion.



- Two-in-one-System: Jede Kammer für unterschiedliche Gelgrößen geeignet
- Multifunktionell:
  - für Standard-Anwendungen bis 90 Volt
  - für High-Voltage-Anwendungen bis 250 Volt
- sehr gutes Preis-Leistungs-Vehältnis
- alle Kammern komplett inkl. Gelträger, Gelgießstand, 2 Kämme
- umfangreiche Zubehör-Palette
- Made in Germany

#### Vorteile

In jeder Kammer benötigen Sie nur einen Gelgießstand für unterschiedliche Gelgrößen. (s. rechte Abb.)



Beispiel: Midi für die Gelgrößen: 124 x 150 mm 124 x 130 mm Art.-Nr.: 101.4500


#### Casting System für lange Gelträger:





### Casting System für kurze Gelträger:



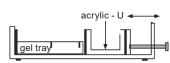

Für die Modelle Mini und Midi wird kein Acryl-U benötigt.

## Modelle Mini, Midi, Maxi

Modelle Serie PM Horizontal-Kammern	Gelgröße	Puffer- volumen	Maße (L x B x H)	Kämme	Zähne	ArtNr.
	40 x 70 mm	180 ml	22 x 135 x 95 mm	1 oder 1,5 mm	4, 5, 6 oder 8	101.4300
Micro horizontal						



# Horizontal-Kammern Modelle Mini, Midi. Maxi

Modelle Horizontal-Kammern	Gelgröße	Puffer- volumen	Maße (L x B x H)	Kämme	Zähne	ArtNr.
	81 x 100 mm 81 x 70 mm	400 ml	220 x 135 x 95 mm	1 oder 1,5 mm	8,11, 13 oder 16	101.4400
Mini horizontal						
	124 x 150 mm 124 x 130 mm	550 ml	260 x 185 x 95 mm	1 oder 1,5 mm	11, 13, 18, 21 oder 25	101.4500
Midi horizontal						
	151 x 170 mm 151 x 100 mm	850 ml	295 x 210 x 95 mm	1 oder 1,5 mm	14, 16, 22, 26 oder 32	101.4600
Midi-Large horizontal						
P	204 x 250 mm 204 x 200 mm	1150 ml	370 x 265 x 95 mm	1 oder 1,5 mm	18, 21, 30 oder 44	101.4700
Maxi horizontal						
Mayi Larga hasisaatal	239 x 250 mm 239 x 200 mm	1350 ml	370 x 295 x 95 mm	1 oder 1,5 mm	21, 26, 36, 42 oder 52	101.4800
Maxi-Large horizontal						
Maxi-Wide horizontal	145 x 239 mm	1050 ml	295 x 295 x 95 mm	1 oder 1,5 mm	21, 26, 36, 42 oder 52	101.4900