

RollerBottle Analog

Beschreibung


Flexibler Rollmischer für Flaschen in verschiedenen Größen. Mit robustem Rollenantrieb ohne auf und ab.

Je nach Größe der Behälter können einzelne Rollen entfernt bzw. versetzt werden (außer Antriebsrolle). Eine Rolle ist jeweils die Antriebsrolle und ist fixiert. Alle weiteren Rollen sind austauschbar.

Zwei Rollen sind in der Standardausführung verbaut. Weitere Rollen sind optional erhältlich.

Die Übertragung der Kraft erfolgt von der ersten auf die weiteren Rollen durch den Kontakt mit den Gefäßen. Die Antriebsrolle sollte mit dem größten und schwersten Behälter beladen werden. Die weiteren Rollen jeweils mit gleicher oder weniger Last. Bitte achten Sie deshalb darauf, dass der Kontakt von einer Rolle auf die nächste nicht unterbrochen ist und die Gefäße anliegen.

Weitere Modelle mit unterschiedlichen Rollenlängen auf Anfrage erhältlich.

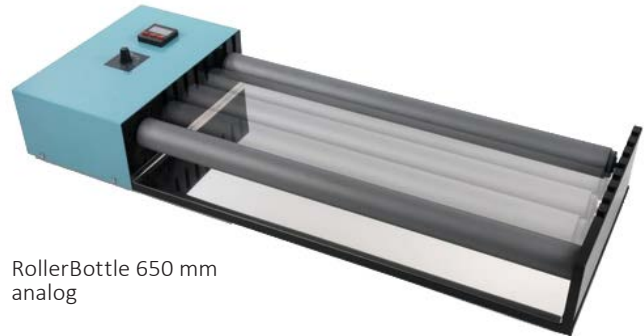

RollerBottle 650 mm analog



Zusatzrolle optional

Modelle RollerBottle Analog

| Rollenlänge | Artikelnummer |
|-------------------|---------------|
| 2 Rollen à 550 mm | 105.1012 |
| 2 Rollen à 650 mm | 105.1020 |

Weitere Modelle auf Anfrage.



Optionales Stapelregal für mehrere Geräte

Sonderbau, optionale Einhausung


Mit der optionalen Plexiglas-Einhausung sind die Flaschen oder Behälter zusätzlich geschützt

Das Gerät befindet sich komplett im Gehäuse und kann von oben bestückt werden.


Eine Steckdose für den RollerBottle befindet sich innen an der Rückwand. Beim Anheben des Deckels unterbricht der Strom automatisch.

Natürlich kann der RollerBottle auch weiterhin unabhängig vom Gehäuse betrieben werden.

Bei Bedarf bitte die Einhausung gesondert anfragen!

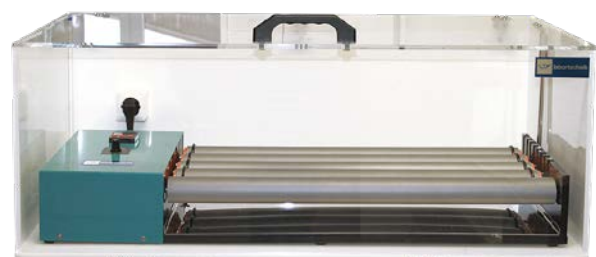

RollerBottle Strong Analog

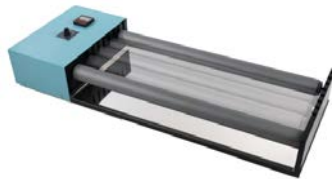

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Rollenanzahl | max. 5 |
| max. Beladung | 25 kg |
| Motorleistung/Eingang | 100 W |
| Motorleistung/Ausgang | 75 W |
| Drehzahlanzeige | analog |
| Drehzahlbereich | 1 – 240 U/min |
| Einstellung Betriebsdauer | 1 sec – 99 h |
| Timer | ja |
| Maße (L x B x H) | 880 x 350 x 130 mm |
| Gewicht | 11,5 kg |
| Standardausstattung | 2 Rollen |
| Ø Rolle | 45,5 mm |
| Material Bodenplatte | Stahl PE-beschichtet |
| zulässige Umgebungstemperatur | 5 – 50 °C |
| max. Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Strom | 230 V / 50/60 Hz |

Rollenmaße

Der Durchmesser einer Rolle beträgt 45,5 mm.

Liegen die Rollen direkt nebeneinander, sind 10,5 mm Platz zwischen den einzelnen Rollen.

Gemessen von der Mitte der ersten Rolle bis zur Mitte der zweiten Rolle sind es 56 mm.