

## Horizontale Elektrophorese-Kammer - Midi-Large

### Produktbeschreibung

Zuverlässige und qualitativ hochwertige Elektrophorese-Systeme aus 8 mm Acrylglas. Die Geräte bieten kurze Laufzeiten, einfache Handhabung und exzellente Ergebnisse.

Bei dieser Produktlinie handelt es sich um ein Two-in-one-System für zwei unterschiedliche Geltypen.

Für die normale DNA-Migration mit einer Stromspannung zwischen 40 und 90 Volt füllen Sie die Kammer bis ca. 2 mm über dem Gel-Level, so dass noch ein Pufferbereich darüber entsteht.

Für eine schnelle DNA-Migration mit hoher Stromspannung bis 250 Volt füllen Sie die Kammer bis zur angegebenen Füll-Linie. Fehlerströme werden so vermieden. Der darüber liegende Pufferbereich hat eine kühlende Funktion.




Elektrophoresekammer  
Midi-Large

### Spezifikationen

- Two-in-one-System: Jede Kammer für unterschiedliche Gelgrößen geeignet
- Multifunktionell:
  - für Standard-Anwendungen bis 90 Volt
  - für High-Voltage-Anwendungen bis 250 Volt
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- inklusive Gelträger, Gelgießstand und 2 Kämmen
- umfangreiche Zubehör-Palette
- Made in Germany

### Technische Daten

Puffervolumen	850 ml
Passende Gelgrößen	151 x 100 mm 151 x 170 mm
Passende Kämmen	1 oder 1,5 mm
Optionale Taschenanzahl	11, 13, 18, 21 oder 25 mm
Abmessungen (L x B x H)	295 x 210 x 95 mm
Artikelnummer	101.4600

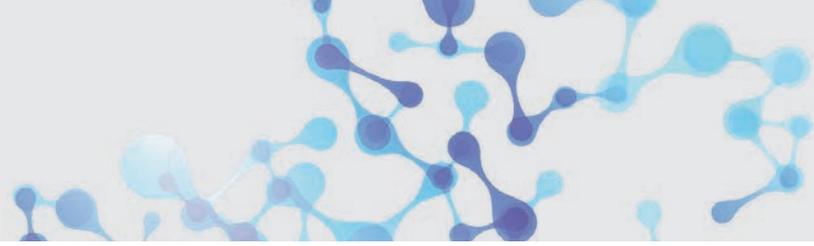

## Horizontale Elektrophorese-Kammer - Midi-Large



### Zubehör

Bestellnr.	Produkt	Kammgröße	Taschen	Breite	Volumen
460.014	Comb	1,5 mm	14	9,0 mm	54 ml
460.016	Comb	1,5 mm	16	7,5 mm	45 ml
460.022	Comb	1,5 mm	22	5,0 mm	30 ml
460.026	Comb	1,5 mm	26	4,0 mm	24 ml
460.132	Comb	1,0 mm	32	3,0 mm	18 ml
460.114	Comb	1,0 mm	14	9,0 mm	36 ml
460.116	Comb	1,0 mm	16	7,5 mm	30 ml
460.122	Comb	1,0 mm	22	5,0 mm	20 ml
460.126	Comb	1,0 mm	26	4,0 mm	16 ml
460.132	Comb	1,0 mm	32	3,0 mm	12 ml
460.450	Gelträger UV durchlässig, 3 Kammpositionen, Trennstrecke 3 x 5,3 oder 2 x 8 cm oder 1 x 16 cm für Gelgröße 15,1 x 17 cm, Gelvolumen ca. 128 ml				
460.460	Gelträger UV durchlässig, 2 Kammpositionen, Trennstrecke 2 x 4,5 oder 1 x 9 cm für Gelgröße 15,1 x 10 cm, Gelvolumen ca. 128 ml				
460.480	Gelgießstand passend für Art. Nr. 460.450 und 460.460				