

## IsoFreeze MCT Rack


### Produktbeschreibung

Geniale optische Kontrolle für Ihre Proben!  
Der Mittelteil des Racks ist mit einem thermochromen Gel gefüllt. Dieses ist in der Lage einen temperaturabhängigen Farbwechsel vorzunehmen. So erkennen Sie sofort, ob Ihre Proben noch die richtige Temperatur haben.

IsoFreeze MCT Racks gewährleisten den Schutz von temperaturempfindlichen Proben wie PCR-Reagenzien, Zellen oder Enzymen.

Bei 7°C gibt es eine deutliche Farbveränderung. Auf diese Weise können Sie auf einen Blick feststellen, wann die Temperatur der Proben über die ursprüngliche Kühltemperatur ansteigt. MCT Racks halten die Probentemperatur bis zu vier Stunden lang unter 4°C.

Jedes Gestell wird mit einem individuellen Deckel aus transparentem Polypropylen geliefert.

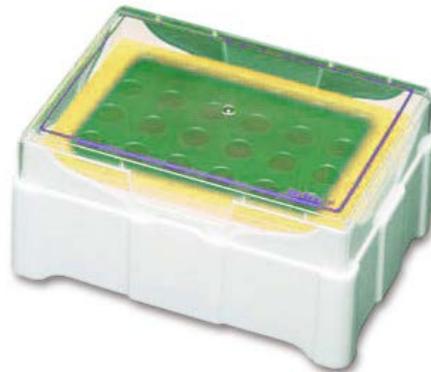

IsoFreeze MCT Rack grün/gelb



IsoFreeze MCT Rack violett/pink

### Technische Daten

Aufnahmekapazität	24 Tubes mit 0,5 / 1,5 / 2,0 ml Volumen
Abmessungen (Rack + Deckel)	146 x 105 x 70 mm (L x B x H)
Material	Polypropylen

### Modelle

Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	Artikelnummer
IsoFreeze MCT Rack Passend für Tubegrößen: 24 x 0,5 / 1,5 / 2,0 ml	grün/gelb	1 Rack mit Deckel	104.0047
IsoFreeze MCT Rack Passend für Tubegrößen: 24 x 0,5 / 1,5 / 2,0 ml	violett/pink	1 Rack mit Deckel	104.0044