

UVC-Desinfektionslampen Serie AR 300–1500

Beschreibung

Die UV-Einheiten der AR-Serie sind in verschiedenen Längen erhältlich und bestens geeignet zur Desinfektion von Raumluft und Oberflächen ohne Personenaufenthalt.

Luft, Oberflächen und Arbeitsflächen werden durch Einwirken von UV-C-Licht von Keimen, Viren, Hefen und Schimmelsporen befreit.

Die Lampen-Serie AR wird inklusive Netzkabel und EU Schuko-Stecker geliefert.
Durch einstecken des Steckers wird das UV-Licht aktiviert.

Anwendungsbereiche

- Labore
- Steril-Werkbänke
- Inkubatoren
- Sicherheitswerkbänke
- Produktionsflächen
- Arbeitsflächen
- Lagerräume

Montage/Wartung

Wand- und Deckenmontage ist möglich (Gerätehalterung ist im Lieferumfang enthalten)
Austausch der Strahler erfolgt einfach über eine Schraubfassung.

Eigenschaften


Vorschaltel Elektronik im Gehäuse wassergeschützt integriert.

Optional

- UV-C-Strahler mit extra Splitterschutz
- Ständer AR zur Befestigung auf dem Arbeitstisch (Bestellnr. 110.5480)
- Extra starke Magnete zur Befestigung an metallischen Oberflächen (Bestellnr. 110.5482)
Achtung! Magnete sind nicht für Edelstahloberflächen geeignet!



UV-Desinfektionseinheit AR-300-1500

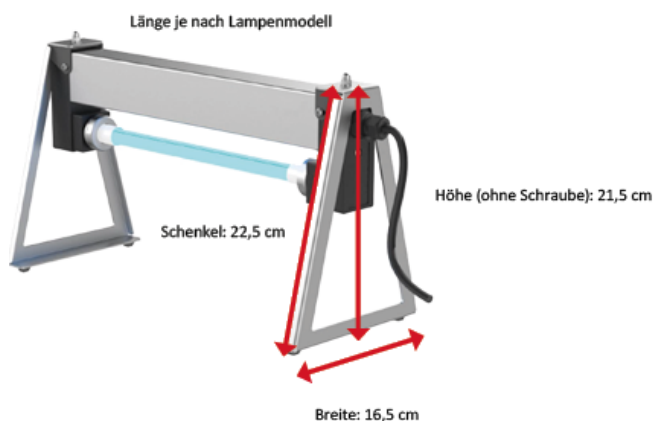

UV-Lampe AR-300 mit optionalem Ständer
Artikelnummer Ständer: 110.5480



WARNUNG:

AR-Lampen sind starke Quellen für ultraviolette Strahlung, die schwere Schäden an ungeschützten Augen und Haut verursachen können.

Wir empfehlen das Tragen von UV-Schutzbrillen und UV-Schutzkleidung, sollten Sie unmittelbar der UV-Lichtquelle ausgesetzt sein.

UVC-Desinfektionslampen Serie AR 300–1500



Technische Daten

Modell	AR300	AR400	AR600	AR810	AR1000	AR1200	AR1500
Artikelnr.	110.5499	110.5500	110.5501	110.5502	110.5503	110.5504	110.5505
Abmessung mm (LxBxH)	390x107x52	490x107x52	700x107x52	900x107x52	1100x107x52	1300x107x52	1600x107x52
Material Gehäuse	Edelstahl V2A/ KS						
Strahler ST1*	1 x high efficiency / 16.000 h						
Leistung	13 W	18 W	29 W	40 W	50 W	61 W	77 W
Spannung	230 V ±10% (50 - 60 Hz)						
Anschluss	Euro-Stecker (Kabel 3 m)						
Gewicht	1,5 kg	2 kg	2,3 kg	3,5 kg	4,2 kg	4,9 kg	6 kg
Schutzklasse	IP54						

*Passende Ersatzlampen erhalten Sie ebenfalls bei LTF Labortechnik, www.labortechnik.com

Montagemöglichkeiten

Das Standard-Montageset mit zwei Halterungen zum Schrauben ist im Lieferumfang enthalten.



Standard-Montageset (inklusive)

Optional

Befestigung mit zwei starken Magneten.
Bestellnr. 110.5482



Achtung!
Nicht für Edelstahloberflächen geeignet!