

Polycarbonat Lagerboxen für Kryotubes 81 Plätze High / Low

Produktbeschreibung

Diese stabilen Aufbewahrungsboxen sind für den Einsatz bei extrem niedrigen Temperaturen (Ultratiefkühlagerung) vorgesehen. Hergestellt aus Polycarbonat, sind sie lagerfähig von -196°C bis +121°C.

Die praktischen Boxen bieten 81 Plätze für Kryotubes und sind in fünf leuchtenden transparenten Farben erhältlich.

Der Gitterindex befindet sich auf dem Rack selbst und nicht auf dem Deckel. Dies ermöglicht eine schnelle und effiziente Probenlokalisierung ohne die Verwirrung der Deckelplatzierung. Um Druckunterschiede zu vermeiden, verfügen die Boxen über Belüftungsöffnungen im Boden und Deckel.


Die Boxen sind in **zwei unterschiedlichen Höhen** erhältlich (L x B x H):
Verpackungseinheit: 5 Boxen gemischt
High: 133 x 133 x **95** mm für 1.2 - 2 ml Tubes
Low: 133 x 133 x **54** mm für 3 - 5 ml Tubes

Spezifikationen

- für extreme Temperaturen von -196°C bis +121°C geeignet
- Material: Polycarbonat (PC) ist besonders temperaturbeständig, bietet eine hohe Schlagfestigkeit ist transparent wie Glas und hat ein geringes Gewicht
- Drainageöffnungen in Behälter und Deckel
- Index-Nummern am Boden fest aufgedruckt
- für alle Standard Mikrotubes und Kryotubes
- transparenter Deckel inklusive



Polycarbonat Lagerbox **Low** mit 81 Plätzen.
Gemischte Farben.

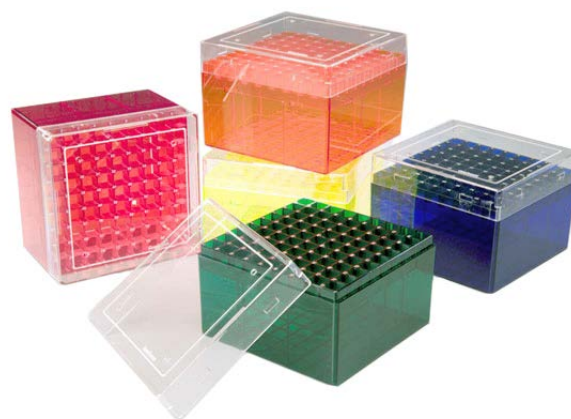

Polycarbonat Lagerbox **High** mit 81 Plätzen.
Gemischte Farben .



Polycarbonat Lagerbox mit 81
Plätzen von oben

Polycarbonat Lagerboxen für Kryotubes 81 Plätze High / Low

Technische Daten

Abbildung	Beschreibung	Farbe Verpackungs- einheit (VE)	Artikel- nummer	Abmessungen (L x B x H)
	Polycarbonat Lagerbox Modell: Low 81 Plätze inklusive Deckel für 1.5 – 2.0 ml Tubes	5 Farben gemischt Verpackungseinheit: 5 Boxen	27-337	133 x 133 x 54 mm
	Polycarbonat Lagerbox Modell: High 81 Plätze inklusive Deckel für 3 – 5 ml Tubes	5 Farben gemischt Verpackungseinheit: 5 Boxen	27-338	133 x 133 x 95 mm

Zubehör



Edelstahlregal

Rostfreies Kühlregal zur Probenlagerung.
Edelstahl-Gestelle mit seitlichem Zugriff
für Tiefkühlschränke.
Passend für alle Standardlagerboxen mit
Maßen bis 136 x 136 x 55 mm.